

Installation des ifap praxisCENTER

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeiner Hinweis ifap i:fox [®] ist vorhanden.....	2
2	Einzelplatz Installation.....	4
3	Installation des Servers.....	8
4	Installation eines Arbeitsplatzes mit ifap praxisCENTER.....	15
5	ifap praxisCENTER auf Hausbesuchsmodulechner.....	15

1. Allgemeiner Hinweis ifap praxisCENTER/i:fox[®] ist vorhanden

Nutzen Sie bereits jetzt das ifap praxisCENTER/i:fox[®], empfehlen wir diese alte Installation zu entfernen, um eine einwandfreie Neuinstallation zu gewährleisten. Die Deinstallation ist im Nachfolgenden beschrieben.

!Wichtiger Hinweis!

Ist ifap praxisCENTER/i:fox[®] lokal installiert, so muss an jedem Arbeitsplatz deinstalliert werden.

Wenn das Programm ifap praxisCENTER/i:fox[®] auf dem Arbeitsplatz installiert ist, erscheint dieser Dialog:



Hier wird Ihnen angezeigt in welchem Verzeichnis das ifap praxisCENTER/i:fox[®] installiert ist, und in welchem Verzeichnis es erwartet wird. Um Komplikationen zu vermeiden, deinstallieren Sie bitte die alte Version. Mit dem Druckknopf **OK** setzen Sie die Installation fort.



Bitte markieren Sie **Programm entfernen**. Hinweis: Im Rahmen der Deinstallation werden das ifap praxisCENTER und ggf. ältere i:fox Versionen entfernt. Ältere i:fox Versionen sind mit dem aktuellen ifap praxisCENTER nicht kompatibel.

Die neue Generation des i:fox wurde funktional stark erweitert und umfasst nun folgende Arzneitherapiesicherheits-Checks: Interaktionen, Kontraindikationen, Lebensmitteluverträglichkeiten, Schwangerschaft und Stillzeit, Doppeltherapie, wirkstoffbezogene Allergien, Therapierisiken für Raucher und Suchthinweise. Interessenten, die den neuen Arzneimitteltherapie-Sicherheits-Check i:fox[®] nutzen möchten, können die Installation mit dieser CD vornehmen und sich für das kostenpflichtige Abonnement registrieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter ifox@ifap.de oder 01805-432713.



Mit dem Druckknopf **Weiter** starten Sie die Deinstallation.




Es erscheint eine Sicherheitsabfrage. Mit dem Druckknopf **Ja** setzen Sie die Deinstallation fort.




Beenden Sie die Deinstallation indem Sie den Druckknopf **Fertig stellen** wählen. Führen Sie anschließend die Installation des ifap praxisCENTER durch.

2. Einzelplatz Installation


Im Folgenden wird die Installation des ifap praxisCENTER am Einzelplatz beschrieben. Starten Sie das Setup für die Installation und beachten Sie die im folgenden beschriebenen Bildschirmanweisungen.

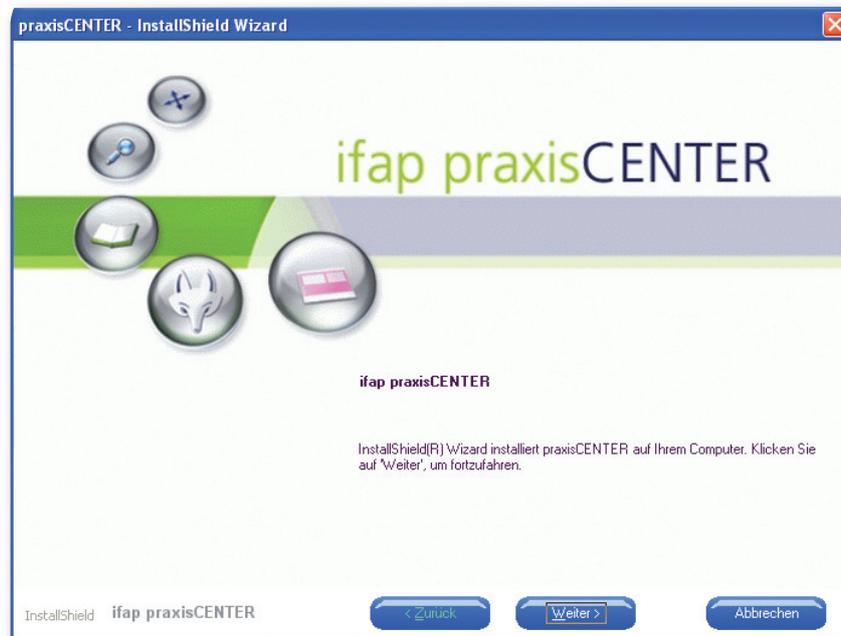


Mit dem Druckknopf **Weiter** starten Sie die Installation des ifap praxisCENTER.
 Mit **Abbrechen** können Sie die Installation abbrechen.

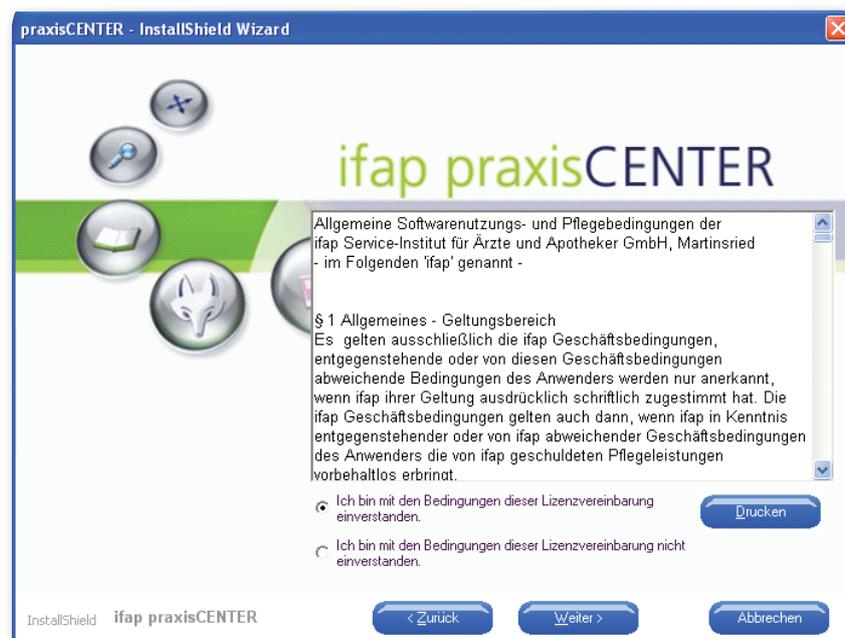


Lesen Sie sich bitte die Lizenzbestimmungen durch und akzeptieren Sie diese, danach setzen Sie die Installation durch betätigen des Druckknopfes **Weiter** fort.

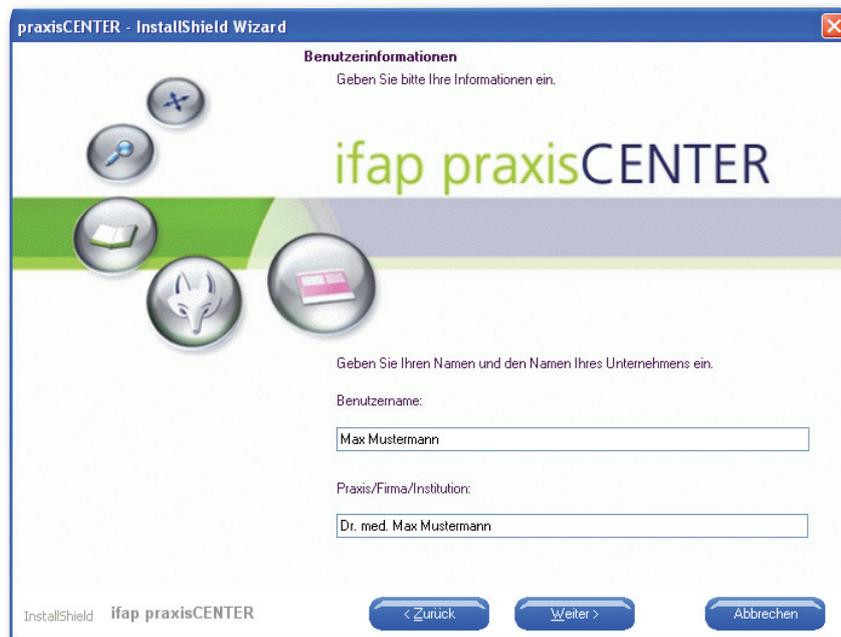

Bitte vervollständigen oder korrigieren Sie die gezeigten Benutzerinformationen, bevor Sie dann mit **Weiter** fortfahren.

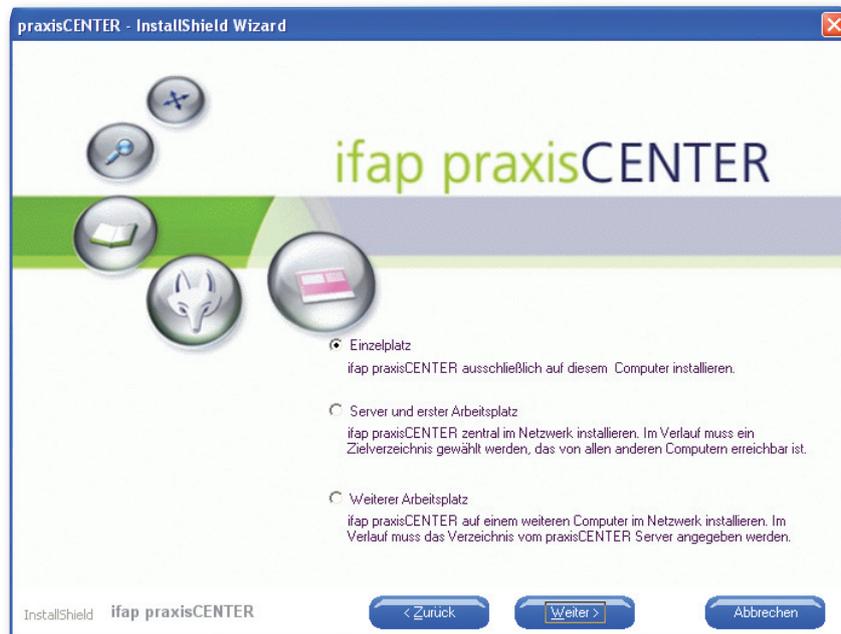

Aktivieren Sie die Option **Einzelplatz**, bevor Sie mit **Weiter** zum nächsten Dialog wechseln.

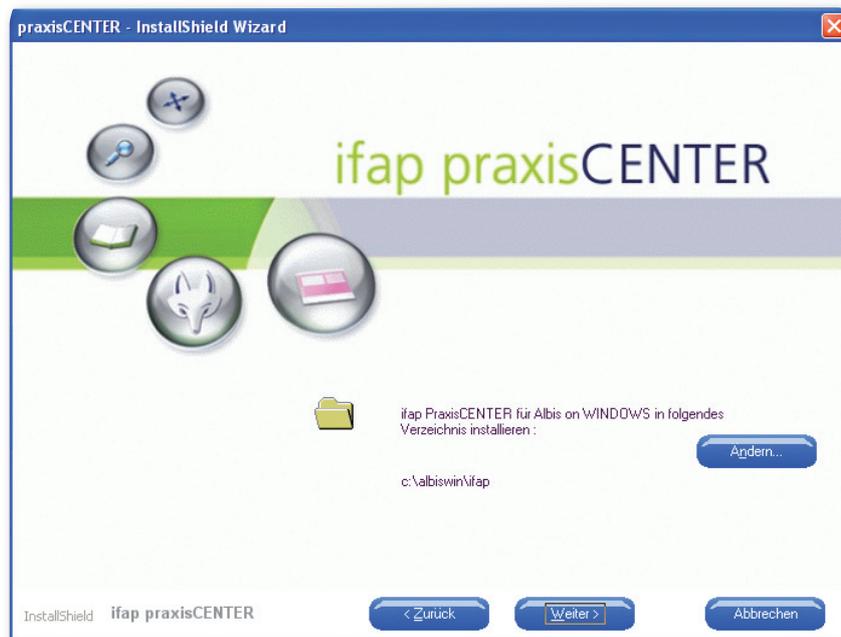

Als Zielverzeichnis wird das zuletzt gestartete ALBIS on WINDOWS ifap Verzeichnis angeboten. Wir empfehlen Ihnen, das angebotene Standardverzeichnis zu wählen und dieses nur in Ausnahmefällen zu ändern. Sie können das vorgegebene Zielverzeichnis wählen oder mit **Ändern...** ein anderes Zielverzeichnis auswählen.


!Wichtiger Hinweis!

Sollten Sie das vorgegebene Zielverzeichnis ändern, beachten Sie bitte unbedingt, dass dieses geänderte Zielverzeichnis für alle Arbeitsplätze freigegeben sein muss!

Mit **Weiter** wird Ihr Zielverzeichnis gespeichert und Sie wechseln zum nächsten Schritt.




Wenn weitere Computer im Netzwerk vorhanden sind, erscheint eine Sicherheitsabfrage. Mit dem Druckknopf **Ja** setzen Sie die Installation des ifap praxisCENTER fort. Mit **Nein** können Sie die Installation abbrechen.

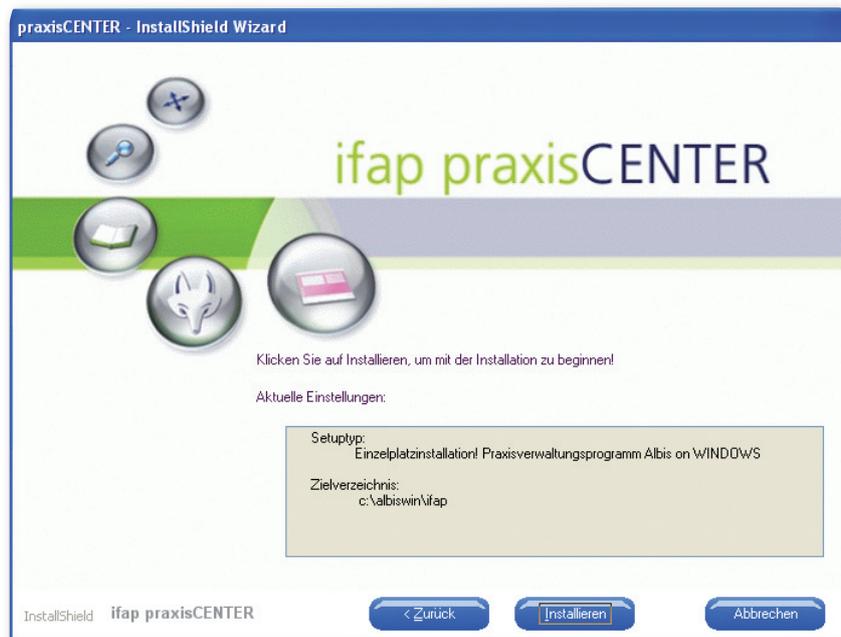


Lesen Sie bitte die Zusammenfassung, der vorgenommenen Einstellungen durch und starten Sie den Kopiervorgang mit einem Klick auf **Installieren**. Mit **Abbrechen** können Sie die Installation abbrechen.



Warten Sie bitte das Ende des Kopiervorgangs ab...

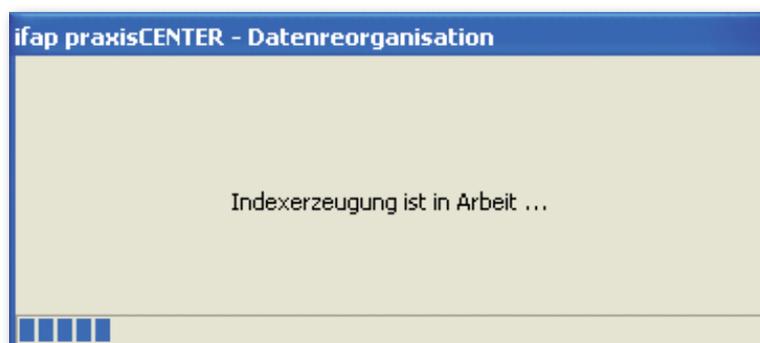

Warten Sie bitte das Ende der Indexerzeugung ab...

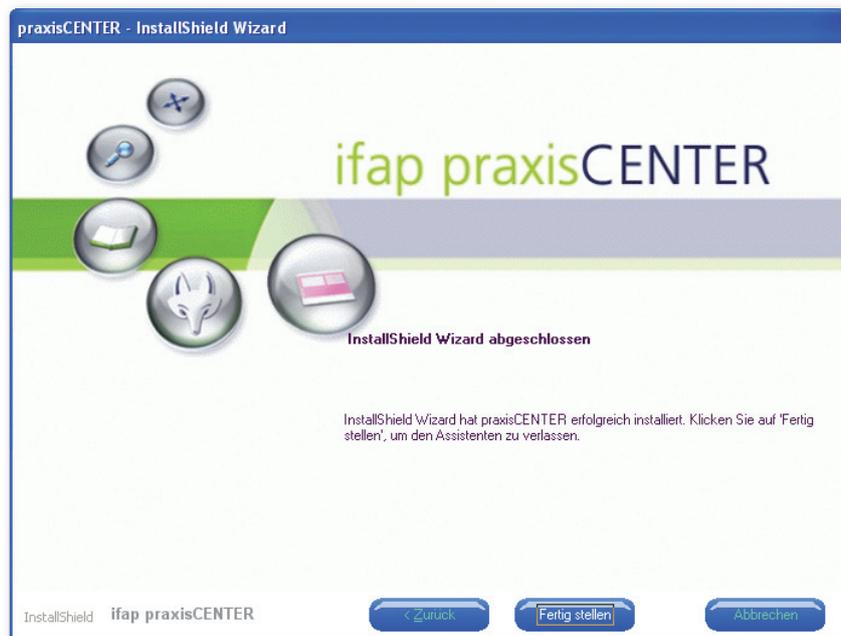


Beenden Sie die Installation des ifap praxisCENTER indem Sie den Druckknopf **Fertig stellen** wählen.




Nach erfolgreicher Installation des ifap praxisCENTER erhalten Sie o. g. Meldung die Sie mit dem Druckknopf **OK** verlassen.

3. Installation des Servers


Im Folgenden wird die Installation des ifap praxisCENTER auf dem Server beschrieben. Starten Sie das Setup für die Installation und beachten Sie die im folgenden beschriebenen Bildschirmanweisungen. Diese Installation kann auch über einen Arbeitsplatz durchgeführt werden, wenn ein direktes Einspielen am Server nicht möglich ist.

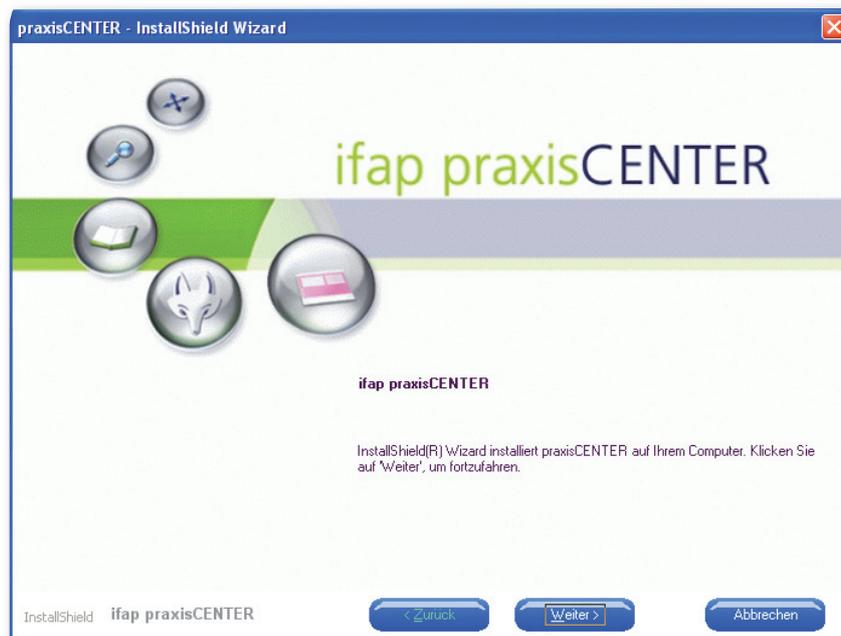


Mit dem Druckknopf **Weiter** starten Sie die Installation des ifap praxisCENTER. Mit **Abbrechen** können Sie die Installation abbrechen.

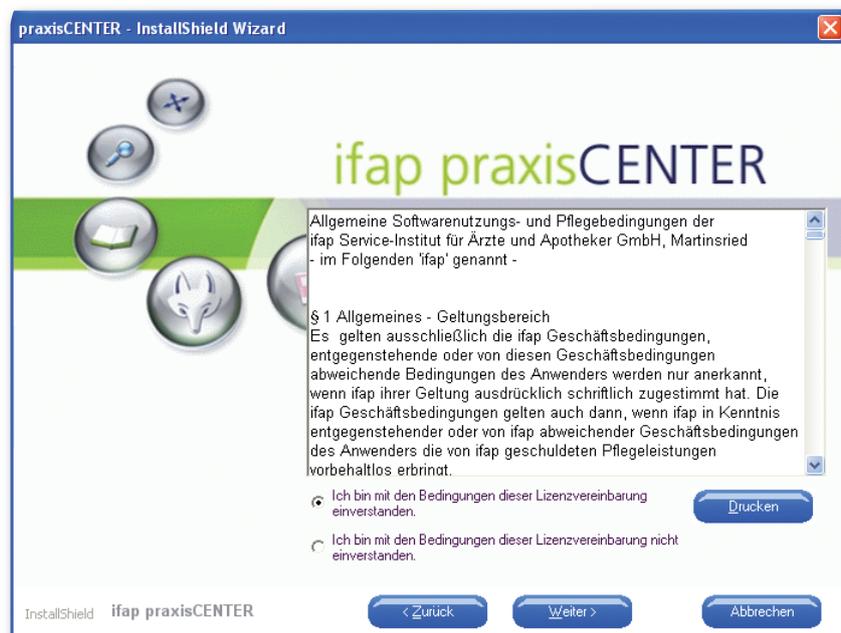


Lesen Sie sich bitte die Lizenzbestimmungen durch und akzeptieren Sie diese, danach setzen Sie die Installation durch betätigen des Druckknopfes **Weiter** fort.

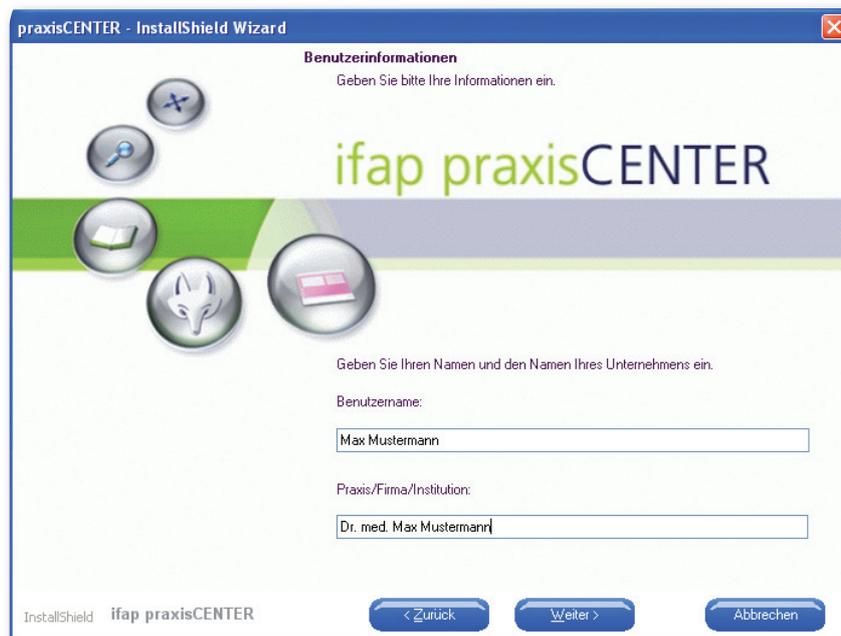

Bitte vervollständigen oder korrigieren Sie die gezeigten Benutzerinformationen, bevor Sie dann mit **Weiter** fortfahren.

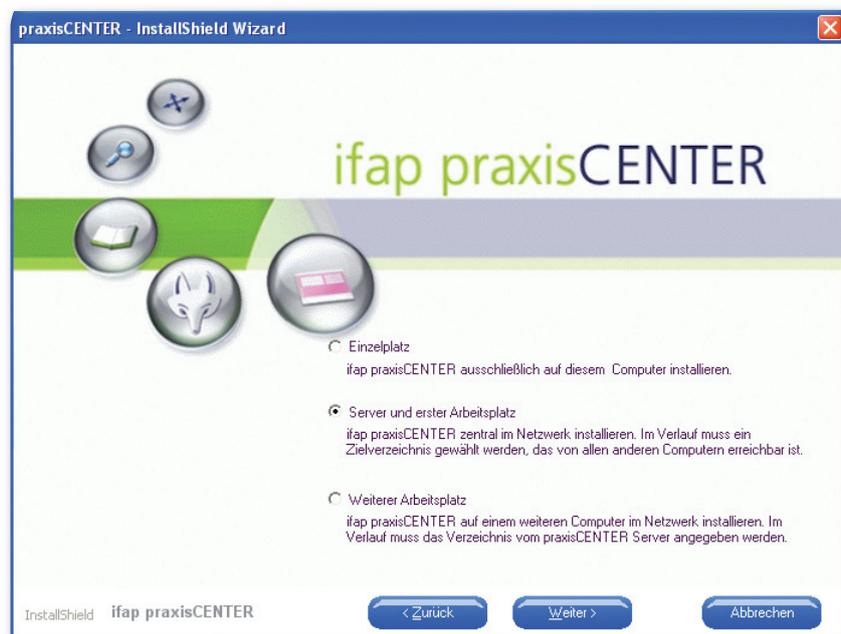

Aktivieren Sie die Option **Server und erster Arbeitsplatz** bevor Sie mit **Weiter** zum nächsten Dialog wechseln.

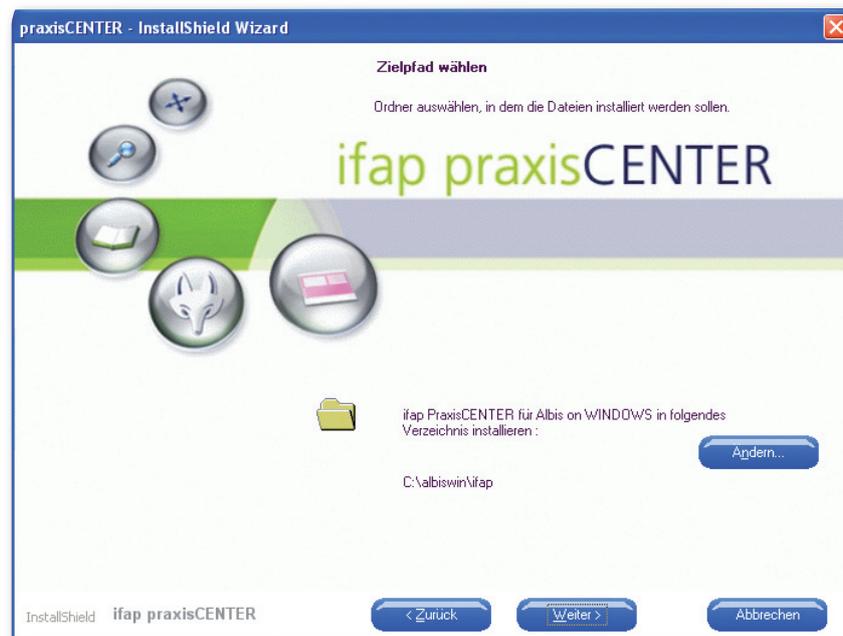


Hinweis Installation am Server

Wird die Installation des Servers und erster Arbeitsplatz direkt am Server durchgeführt, wird als Zielverzeichnis das zuletzt gestartete ALBIS on WINDOWS ifap Verzeichnis angeboten. Wir empfehlen Ihnen, das angebotene Standardverzeichnis zu wählen, und dieses nur in Ausnahmefällen zu ändern. Sie können das vorgegebene Zielverzeichnis wählen oder mit Ändern... ein anderes Zielverzeichnis auswählen.

!Wichtiger Hinweis!

Sollten Sie das vorgegebene Zielverzeichnis ändern, beachten Sie bitte unbedingt, dass dieses geänderte Zielverzeichnis für alle Arbeitsplätze freigegeben sein muss!

Mit Weiter wird Ihr Zielverzeichnis gespeichert und Sie wechseln zum nächsten Schritt.

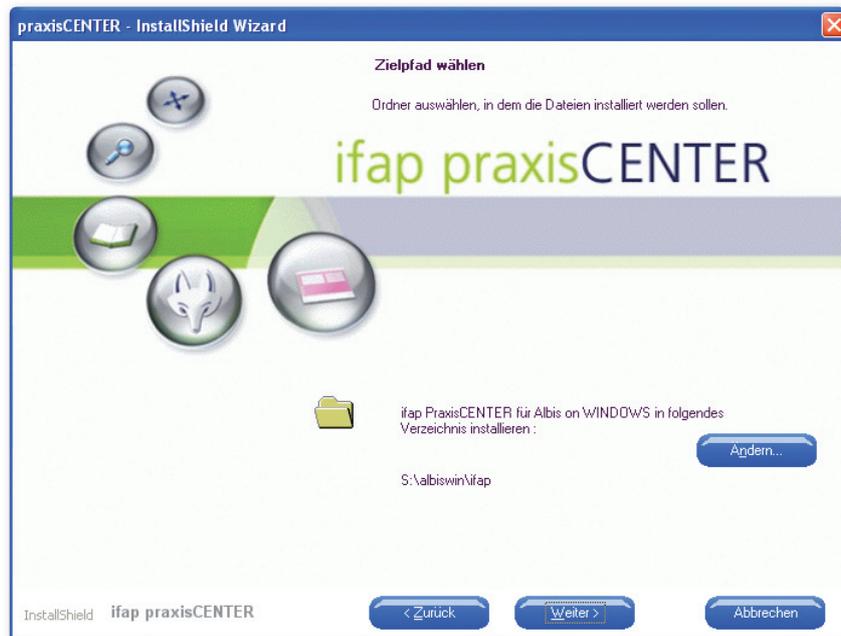


Hinweis Installation über einen Arbeitsplatz

Die Installation des Servers und erster Arbeitsplatz kann auch über einen Arbeitsplatz durchgeführt werden. Als Zielverzeichnis wird das zuletzt gestartete ALBIS on WINDOWS ifap Verzeichnis auf dem Server angeboten. Wir empfehlen Ihnen, das angebotene Standardverzeichnis zu wählen, und dieses nur in Ausnahmefällen zu ändern. Sie können das vorgegebene Zielverzeichnis wählen oder mit **Ändern...** ein anderes Zielverzeichnis auswählen.


!Wichtiger Hinweis!

Sollten Sie das vorgegebene Zielverzeichnis ändern, beachten Sie bitte unbedingt, dass dieses geänderte Zielverzeichnis für alle Arbeitsplätze freigegeben sein muss!


Mit **Weiter** wird Ihr Zielverzeichnis gespeichert und Sie wechseln zum nächsten Schritt.

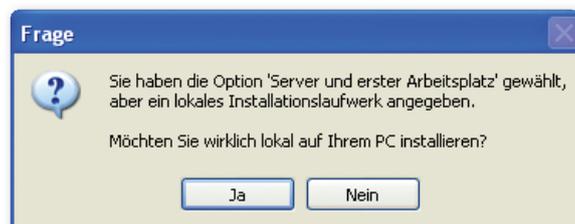

Wird die Installation des Servers und erster Arbeitsplatz direkt am Server durchgeführt, kann die angegebene Meldung angezeigt werden. Mit dem Druckknopf **Ja** setzen Sie die Installation des ifap praxisCENTER fort. Mit **Nein** können Sie die Installation abbrechen.

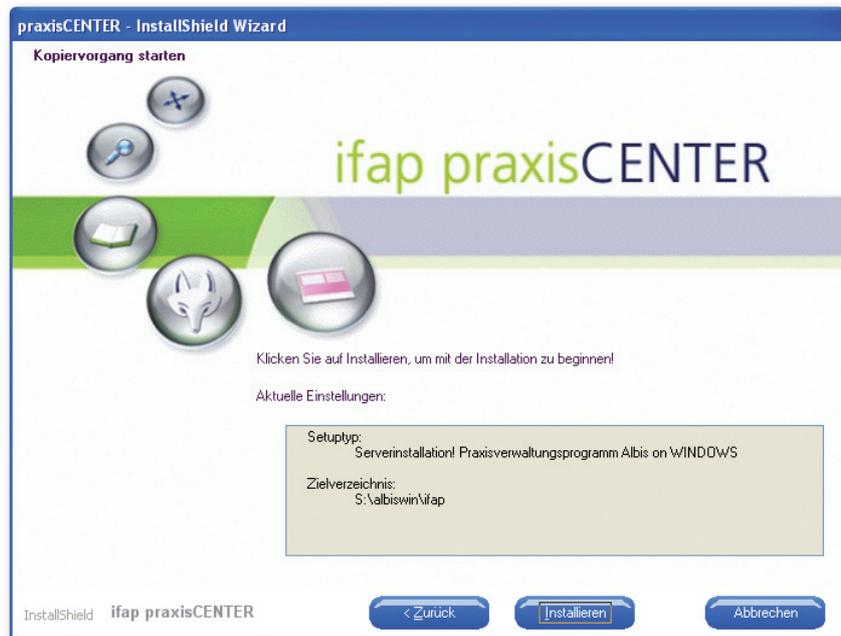


Lesen Sie bitte die Zusammenfassung für die vorgenommenen Einstellungen durch und starten Sie den Kopiervorgang mit einem Klick auf **Installieren**. Mit **Abbrechen** können Sie die Installation abbrechen.

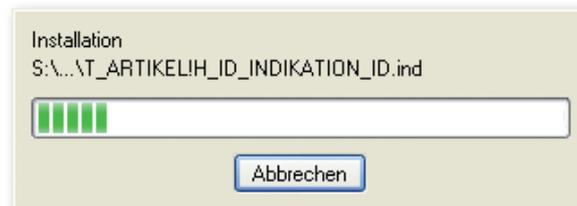

Warten Sie bitte das Ende des Kopiervorgangs ab...



Warten Sie bitte das Ende der Indexerzeugung ab...

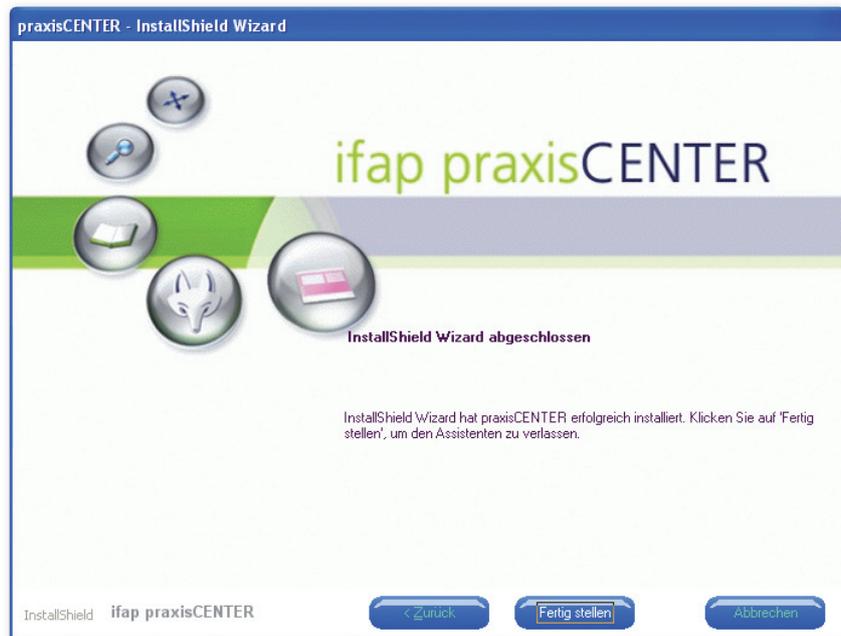

Beenden Sie die Installation des ifap praxisCENTER indem Sie auf **Fertig stellen** klicken.



Nach erfolgreicher Installation des Arbeitsplatzes erhalten Sie eine Hinweismeldung wie Sie auf weiteren Arbeitsplätzen ifap praxisCENTER ohne Installations-CD installieren können. Verlassen Sie das Fenster mit dem Druckknopf **OK**. Siehe dazu Kapitel 4 auch Installation weiterer AP mit ifap praxisCENTER.



Nach erfolgreicher Installation des ifap praxisCENTER erhalten Sie o. g. Meldung die Sie mit dem Druckknopf **OK** verlassen.

4. Installation eines Arbeitsplatzes mit ifap praxisCENTER

Nach erfolgreicher Installation des ifap praxisCENTER im vorgeschlagenen Verzeichnis auf dem Server wird bei dem ersten Starten von ALBIS on WINDOWS an jedem Arbeitsplatz das ifap praxisCENTER automatisch installiert. Bei Unstimmigkeiten wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen ALBIS on WINDOWS Vertriebs- und Servicepartner.

5. ifap praxisCENTER auf Hausbesuchsmodulechner

Wenn Sie das ALBIS Hausbesuchsmodule nutzen, müssen Sie auf dem Notebook eine Einzelplatz-zinstallation des ifap praxisCENTER durchführen. Somit stehen Ihnen alle Daten auch während des Hausbesuchs zur Verfügung. Um die Installation des ifap praxisCENTER erfolgreich durchzuführen, starten Sie bitte Ihr Hausbesuchs-ALBIS on WINDOWS und beenden dieses direkt wieder. Im Anschluss führen Sie bitte die Installation des ifap praxisCENTER anhand der Installationsanleitung in Kapitel 2 durch.

!Wichtiger Hinweis!

Zukünftige Updates des ifap PraxisCENTER müssen zusätzlich auch auf dem Hausbesuchsmodulechner eingespielt werden.