

Enthaltene Programmänderungen

DMP-Assist Version 4.3.0.0

Inhaltsverzeichnis

1	Systemvoraussetzungen	3
2	Datensicherung vor dem Update	3
3	Die Installation des Updates	5
3.1.	Wichtige Hinweise zum Update	5
3.2.	Update Installation am Server.....	6
3.3.	Update Installation am Client.....	10
4	Inhalte des Updates.....	11

1 Systemvoraussetzungen

Das DMP-Assist Update in der Version 4.3.0.0 benötigt für die Installation folgende Voraussetzungen:

Betriebssysteme:

- Windows 2000 SP4
- Windows XP Professional SP2 oder höher
- Windows 2003 SP2

Prozessor:

- min. Intel Pentium III 500 MHz (x86)

Arbeitsspeicher:

- min. 256 MB

Bildschirmauflösung:

- min. 1024 x 768

Netzwerk:

- TCP/IP-Protokoll

Vorversion:

- min. DMP-Assist 4.0.0

Sonstiges:


- ODBC-Datenbank-Schnittstelle
- Internet-Explorer 6.0 SP1 oder höher
- Acrobat Reader
- JAVA Runetimes 1.4.2 oder höher
- MS .NET Fraumworks 2.0

2 Datensicherung vor dem Update

Erstellen Sie vor der Installation des Updates eine Sicherung Ihrer aktuellen DMP-Assist Daten. Beenden Sie hierfür auf allen anderen Arbeitsplätzen alle noch laufenden DMP-Assist Anwendungen. Anschließend starten Sie bitte am Server den DMP-Assist entweder vom Desktop aus oder aus der Programmgruppe `Start Programme DMP-Assist30 DMP-Assist 3.0` heraus. Wechseln Sie danach in das Menü `Extras Datensicherung Sicherung`. Es erscheint folgende Hinweismeldung:



Bestätigen Sie diese mit dem Druckknopf OK. Der DMP-Assist wird geschlossen und folgende Hinweismeldung wird Ihnen angezeigt:

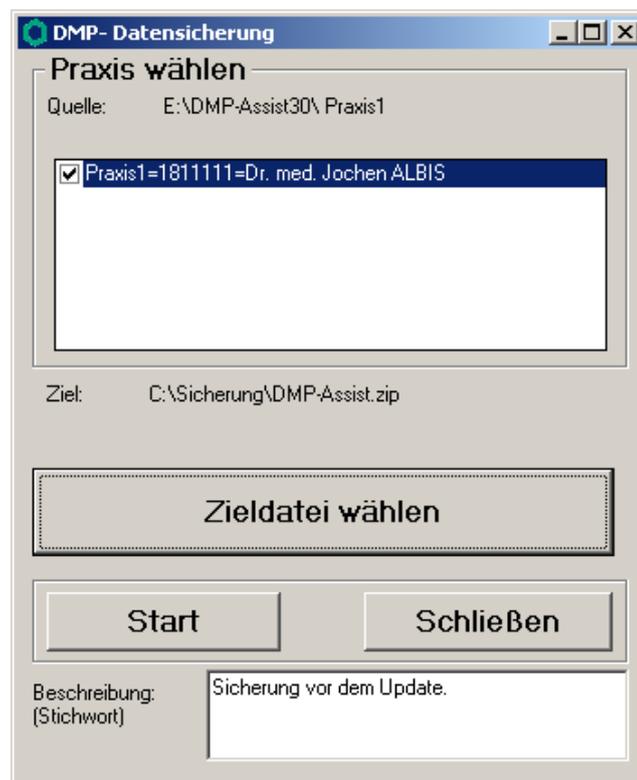

Markieren Sie bitte zuerst die Praxis, die Sie sichern möchten. Im Anschluss wählen Sie über den Druckknopf **Zieldatei wählen** ein Verzeichnis für Ihre Sicherung aus. Geben Sie im Feld **Beschreibung** einen Kurztext ein, warum diese Sicherung erstellt wird. Bitte Betätigen Sie den Druckknopf **Start**, die Sicherung wird nun erstellt. Nach erfolgreicher Erstellung Ihrer Datensicherung erhalten Sie folgende Hinweismeldung:



Quittieren Sie die Meldung mit dem Druckknopf **OK** und verlassen Sie die DMP-Datensicherung über den Druckknopf **Schließen**.

3 Die Installation des Updates

3.1. Wichtige Hinweise zum Update

Bitte informieren Sie Ihre Mitarbeiter rechtzeitig über die Änderungen, die in diesem Update enthalten sind.

Die Installation des DMP-Assist online Updates wird ausschließlich am DMP-Assist Server vorgenommen. Die Aktualisierung der DMP-Assist Nebenstellen erfolgt nach dem Server-Update beim ersten Programmstart des DMP-Assist Client automatisch.

Vor der Installation der neuen Programmdateien prüft das Update automatisch, ob noch DMP-Assist Anwendungen auf den Nebenstellen gestartet und, dass alle Zugriffe auf die Datenbank geschlossen sind. Ist das nicht der Fall, erscheint folgende Hinweismeldung:



Kontrollieren Sie in dem Fall alle Rechner darauf, dass kein DMP-Assist Programm mehr gestartet ist und wiederholen Sie die Installation des Updates.

3.2. Update Installation am Server


Schließen Sie alle noch offenen Fenster im ALBIS und öffnen Sie anschließend das Menü Extern telemed online Update. Das ALBIS on WINDOWS wird automatisch geschlossen und Sie werden zum *ALBIS Online Update Portal* weitergeleitet.




Markieren Sie den Eintrag **DMP-Assist Version 4.3** und klicken Sie anschließend auf den Druckknopf Download.




Klicken Sie danach auf den Druckknopf Speichern.

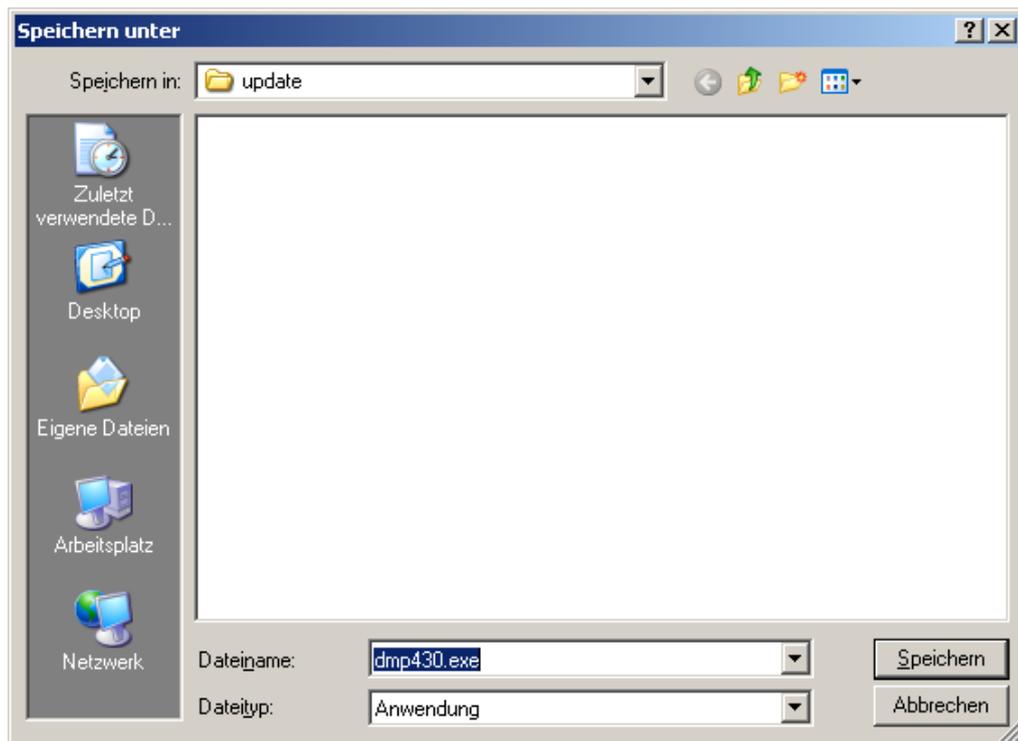


Klicken dann erneut auf den Druckknopf `Speichern`, um das Update herunter zu laden.

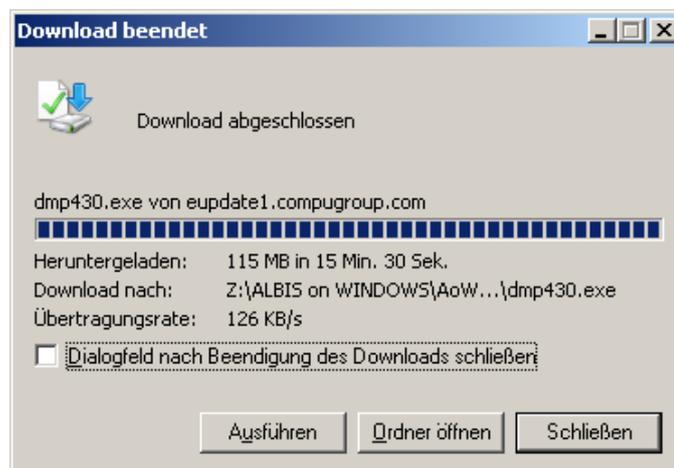


Nachdem der Download abgeschlossen ist, klicken Sie auf den Druckknopf `Schließen` und beenden Sie anschließend den Internet-Explorer.

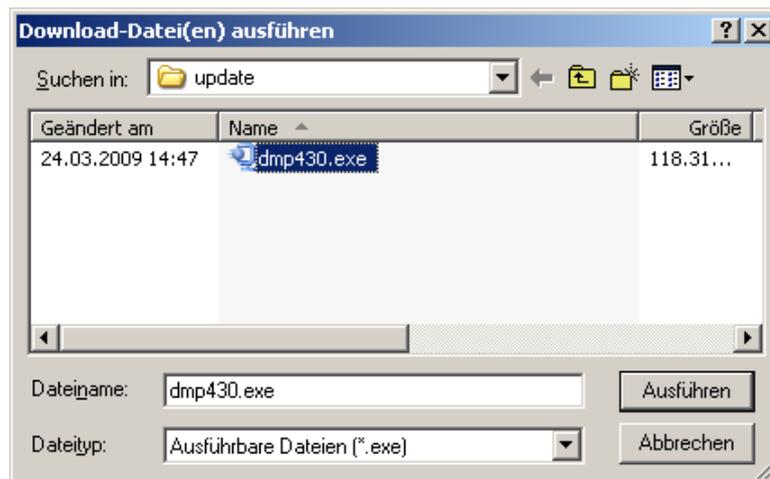

Markieren Sie nun die Datei **dmp430.exe** und klicken Sie auf den Druckknopf **Ausführen**. Nachdem die Daten des Update temporär entpackt sind, startet die Update-Installation des DMP-Assists automatisch.

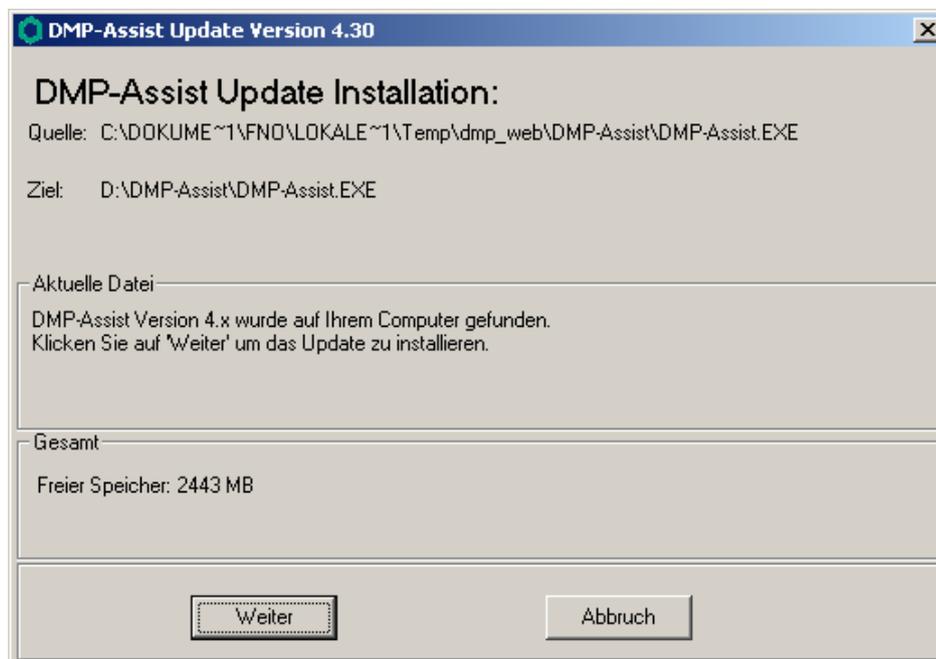

Klicken Sie bitte auf den Druckknopf **Weiter**, um zum nächsten Schritt in der Update-Installation zu gelangen.

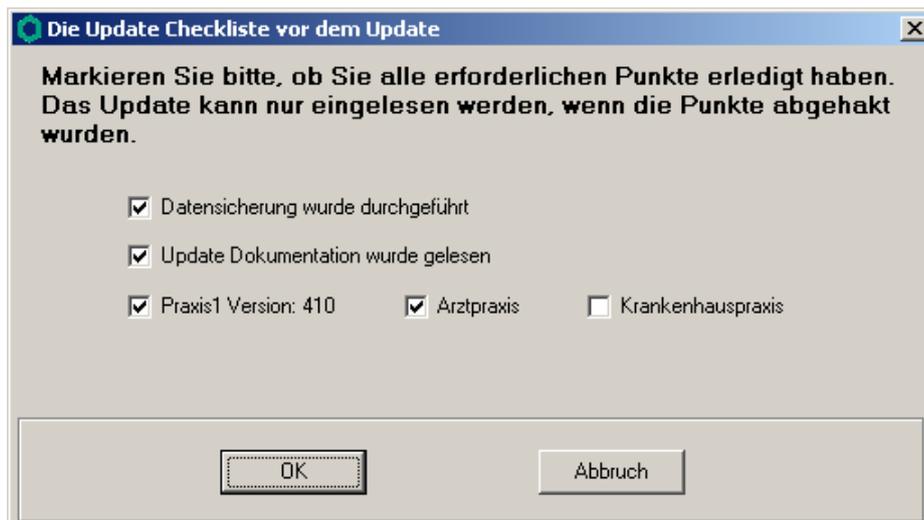

Bevor mit der Installation der neuen Programmdateien begonnen werden kann, füllen Sie bitte die Update-Checkliste, wie oben gezeigt, aus.

Datensicherung wurde durchgeführt

- Bestätigt die Durchführung einer aktuellen Datensicherung Ihrer DMP-Assist Daten.

Update Dokumentation wurde gelesen

- Bestätigt, dass die Update-Dokumentation aufmerksam gelesen wurde.

Praxis1 Version: 4.10


- Bestätigt Ihnen, dass Ihre DMP-Assist Datenbank gefunden wurde und in der korrekten Version 4.1.0.0 vorliegt.

Arztpraxis / Krankenhauspraxis

- Wählen Sie hier die für Sie geltende Praxisform.

Nachdem Sie alle Punkte abgehakt haben, starten Sie bitte den Kopiervorgang mit dem Druckknopf OK. Während dem Kopiervorgang wird je eingerichteter Praxis einmal die folgende Meldung erscheinen.

Ist die Update-Installation erfolgreich abgeschlossen, so erscheint folgende Hinweismeldung:

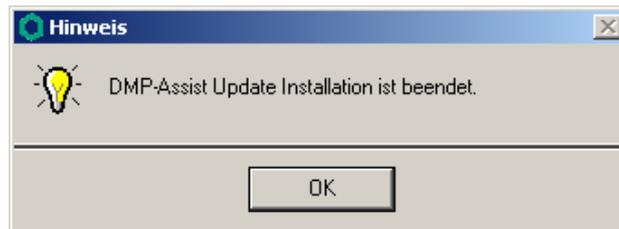


3.3. Update Installation am Client

Um den DMP-Assist auf den Nebenstellen zu aktualisieren, starten Sie bitte das Programm entweder vom Desktop aus oder aus der Programmgruppe `Start Programme DMP-Assist30 DMP-Assist 3.0` heraus.


Die DMP-Clientanwendung erkennt automatisch, dass auf dem DMP-Assist Server eine neue Programmversion eingespielt wurde und zeigt Ihnen folgende Meldung:



Bestätigen Sie die Meldung mit dem Druckknopf `OK`. Anschließend wird Ihnen folgende Hinweismeldung angezeigt:

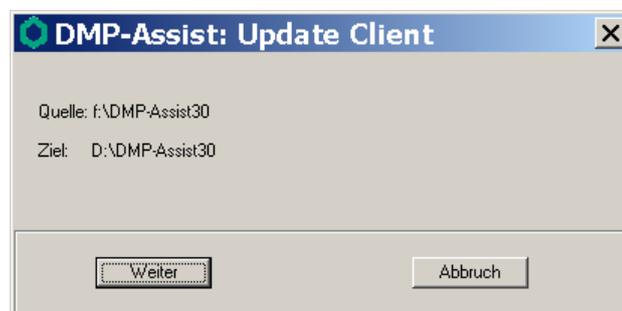

Um die Installation für das Client-Update zu starten, klicken Sie bitte auf den Druckknopf `Weiter`. Nachdem alle neuen Programmdateien erfolgreich auf die Nebenstelle kopiert sind, erscheint folgende Hinweismeldung:

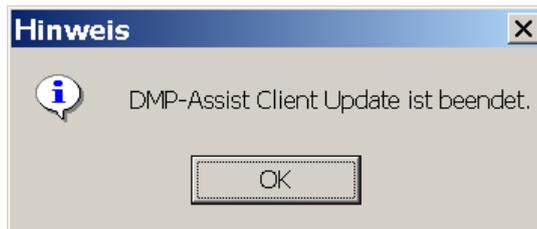

4 Inhalte des Updates

Neben dem aktuellen Prüf- und Krypto-Modul der KBV sind noch die folgenden Änderungen in dieser Version enthalten:

- Druck der Patientenliste (Button mit Drucker)
- Tastaturbelegung verbessert (Ausfüllen der Doku per Tastatur)
- Unter [Extras] | [Optionen] | [Einstellung] kann die Prüfung auf die inaktiven Patienten aktiviert/deaktiviert werden (bei aktivierter Prüfung kann der Aufruf des DMP mehr Zeit in Anspruch nehmen)
- Angepasste Plausibilitäten
- Anpassung der ED's - Schulung
- Korrektur der Bestellliste
- Korrektur des Drucks der Bestellliste
- Geänderte Farben (das Grün wurde angepasst)
- Altdokumentationsdaten wird nun auf der linken Seite aufgeführt und kann bei Auswahl, alle Daten für die Dokumentation übernehmen
- Plausibilitätsprüfung kann nun auch unabhängig von der Eingabeseite angewählt werden. Man kann auf jeder Eingabeseite die Fehlerliste aufrufen
- Neue Einverständniserklärung für Brustkrebs